

Pour utilisation diagnostique *in vitro***REVISION ANNUELLE**

Revu par :	Date	Revu par :	Date

PRINCIPE**APPLICATION**

Le réactif TG, utilisé avec le Systèmes SYNCHRON CX® et le Calibrateur MULTI™ SYNCHRON CX, est destiné à la détermination quantitative de la concentration de la triglycérides totale (TG) dans le sérum ou le plasma humain.

SIGNIFICATION CLINIQUE


Les mesures de triglycérides sont utilisées pour le diagnostic et le traitement de patients atteints de diabète sucré, de néphrose, d'obstruction du foie, ainsi que d'autres maladies impliquant des troubles du métabolisme lipidique ou endocriniens.

METHODOLOGIE

Le réactif triglycérides GPO est utilisé pour mesurer la concentration des triglycérides par une méthode à point final minuite.^{1,2} Les triglycérides dans l'échantillon sont hydrolysés en glycérol et en acides gras libres par la lipase. Une séquence de trois étapes enzymatiques couplées utilisant la glycérol-kinase (GK), la glycérophosphate-oxydase (GPO) et le peroxydase de raifort (HPO) cause le couplage par oxydation de l'acide 3,5-dichloro-2-hydroxybenzènesulfonique (DHBS) avec la 4-aminoantipyrine pour former un colorant de quinonéimine rouge.

Le Systèmes SYNCHRON CX® distribue automatiquement les volumes d'échantillon et de réactif appropriés dans la cuvette. Le rapport de dilution suivant est utilisé : 1 volume d'échantillon pour 100 volumes de réactif. Le système contrôle la variation de l'absorbance à 520 nanomètres. Cette variation d'absorbance est directement proportionnelle à la concentration de TG dans l'échantillon et est utilisée par le système pour calculer et exprimer la concentration en TG.

REACTION CHIMIQUE

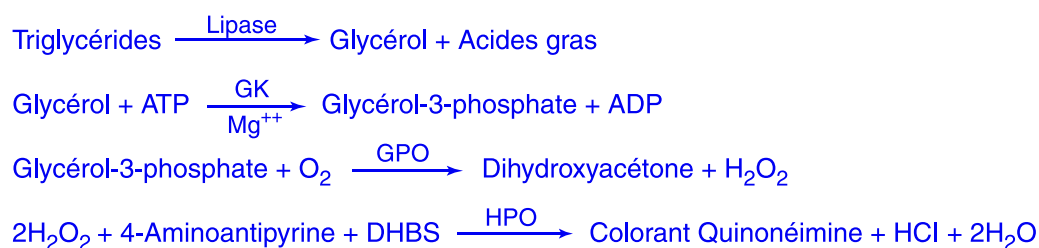

F015258L.EPS

ECHANTILLON

TYPE D'ECHANTILLON

Les échantillons de liquide biologique doivent être prélevés selon la procédure utilisée pour tout test de laboratoire clinique.³ Il est préférable d'utiliser des échantillons de sérum ou de plasma fraîchement prélevés. Les anticoagulants pouvant être utilisés sont listés à la section REMARQUES SUR LA PROCÉDURE de ce mode d'emploi. Il n'est pas recommandé d'utiliser des échantillons de sang total ou d'urine.

CONSERVATION ET STABILITE DES ECHANTILLONS

1. Les tubes de sang doivent toujours être gardés bouchés et à la verticale. Il est recommandé de séparer physiquement le sérum ou le plasma des cellules dans les deux heures qui suivent le moment du prélèvement.⁴
2. Le sérum ou le plasma séparé ne doit pas rester plus de 8 heures à température ambiante. Si les analyses ne sont pas achevées dans les 8 heures, conserver le sérum ou le plasma entre +2 °C et +8 °C. Si les analyses ne sont pas effectuées dans les 48 heures ou que l'échantillon séparé doit être conservé au-delà de 48 heures, les échantillons doivent être congelés entre -15 °C et -20 °C. Les échantillons congelés ne doivent être décongelés que une fois. La substance à analyser des échantillons peut se détériorer si les échantillons sont congelés et décongelés de façon répétée.⁴

Conditions supplémentaires concernant la conservation et la stabilité des échantillons, définies par le laboratoire :

VOLUME D'ECHANTILLON

Le volume optimum d'un godet d'échantillon est 0,5 mL. Consulter le tableau des tubes d'échantillons primaires (réf. 248511) pour les volumes optimums des échantillons de tubes primaires.

CRITERES DE REJET D'ECHANTILLONS

Se référer à la section REMARQUES PROCÉDURALES de ce mode d'emploi pour avoir les échantillons qui ne peuvent être acceptés.

Critères de rejet d'échantillons propres au laboratoire :

PREPARATION DU PATIENT

Il est recommandé de prélever des échantillons de sang après que le patient ait été à jeun pendant 12 heures.

Instructions spéciales concernant la préparation du patient, propres au laboratoire :

MANIPULATION DES ECHANTILLONS

Instructions spéciales du laboratoire concernant la manipulation des échantillons :

REACTIFS

CONTENU

Chaque coffret contient les articles suivants :

Deux cartouches de réactif TG (2 x 300 tests)

Une feuille d'instructions

VOLUMES PAR TEST

Volume d'échantillon	3 µL
Volume total de réactif	300 µL
Volumes des cartouches	
A	285 µL
B	15 µL
C	--

COMPOSANTS ACTIFS

CONSTITUANTS DU REACTIF

Lipase	93 U/L
Adénosine triphosphate (ATP)	2,52 mmol/L
Glycérol kinase (GK)	4 KUI/L
Glycérophosphate oxydase (GPO)	1,1 KUI/L
4-aminoantipyrine	0,71 mmol/L
Acide 3,5-Dichloro-2-Hydroxybenzènesulfonique (DHBS)	1,54 mmol/L
Peroxidase de raifort (HPO)	9 KUI/L

Contient également d'autres composés non réactifs nécessaires aux performances optimales du système.

ATTENTION

L'azoture de sodium, utilisé comme agent de conservation, peut réagir avec le métal des canalisations et former des composés explosifs. Voir le National Institute for Occupational Safety and Health Bulletin: Explosive Azide Hazards (8/16/76).

MATERIEL NECESSAIRE MAIS NON FOURNI AVEC LE COFFRET A REACTIFS

Calibrateur MULTI™ SYNCHRON CX

Au moins deux niveaux de matériel de contrôle

Solution saline

PREPARATION DU REACTIF

1. Transférer qualitativement le contenu du compartiment de réactif le plus petit (C) dans le compartiment de réactif le plus grand (A).
2. Reboucher la cartouche et la renverser doucement plusieurs fois pour bien mélanger.

PERFORMANCES ACCEPTABLES DU REACTIF

L'acceptabilité d'un réactif est déterminée par un étalonnage réussi et par des résultats de contrôle de qualité respectant les critères d'acceptation du laboratoire.

CONSERVATION ET STABILITE DU REACTIF

Conservé entre +2° C et +8° C dans son emballage non ouvert, le réactif TG reste stable jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette de la cartouche. Une fois préparé, le réactif reste stable pendant 30 jours entre +2° C et +8° C, sauf si la date d'expiration est dépassée. NE PAS CONGELER.

Lieu de stockage du réactif :

ETALONNAGE

CALIBRATEUR NECESSAIRE

Calibrateur MULTI™ SYNCHRON CX

PREPARATION DU CALIBRATEUR

Aucune préparation n'est nécessaire.

CONSERVATION ET STABILITE DU CALIBRATEUR

S'il n'est pas ouvert, il est possible de conserver le Calibrateur MULTI™ SYNCHRON CX entre -15 °C et -20 °C jusqu'à la date d'expiration indiquée sur le flacon du calibrateur. Les calibrateurs ouverts, refermés et conservés entre +2 °C et +8 °C sont stables pendant 20 jours à moins que la date d'expiration ne soit dépassée.



ATTENTION

Ce produit est d'origine humaine et il doit être manipulé comme étant susceptible de transmettre des maladies infectieuses. Chaque unité de sérum ou de plasma utilisée pour la préparation de ce produit a été testée selon des méthodes approuvées par la "Food and Drug Administration" (FDA - Administration américaine des produits alimentaires et pharmaceutiques) et a été trouvée négative quant à la présence d'anticorps anti-VIH 1 et 2 et anti-HCV, et négative pour l'antigène Hbs. Comme aucune méthode ne peut offrir la certitude totale que le virus du sida, de l'hépatite B et de l'hépatite C ou tout autre agent infectieux d'origine humaine non recherché est absent du produit, celui-ci doit être manipulé comme étant susceptible de transmettre des maladies infectieuses, conformément aux précautions en usage. Ce produit peut également contenir d'autres substances d'origine humaine qui n'ont pas été mises en évidence car il n'existe pas de test approprié pour les détecter, ou n'ont pas été recherchées. La FDA recommande que de tels échantillons soient manipulés selon le niveau 2 concernant la sécurité sur les substances biologiques des Centers for Disease Control.⁵

Emplacement de conservation des calibrateurs :



INFORMATIONS SUR L'ETALONNAGE

1. Le système doit avoir enregistré en mémoire une courbe d'étalonnage valide avant l'analyse des échantillons de patients ou des contrôles.
2. Dans des conditions de fonctionnement habituelles, la cartouche de réactif TG doit être étalonnée tous les 14 jours et aussi lors du remplacement de certaines pièces ou lors de certaines procédures d'entretien, comme indiqué dans le *manuel d'utilisation* du SYNCHRON CX. Ce dosage possède un étalonnage intra-lot. Se référer à la section 6 du *manuel d'utilisation* du SYNCHRON CX pour plus d'informations sur cette option.
3. Pour plus de détails sur l'étalonnage voir la section 6 du *manuel d'utilisation* du SYNCHRON CX.
4. Le système exécute automatiquement des contrôles de vérification de l'étalonnage et fournit des données à la fin de l'étalonnage. En cas d'échec de l'étalonnage, le système imprime les résultats accompagnés des codes

d'erreur et avertit l'opérateur de l'échec. Pour obtenir une explication des codes d'erreur, consulter l'annexe G de la section 10 du *manuel d'utilisation* SYNCHRON CX.

TRAÇABILITÉ

Pour plus de renseignements sur la traçabilité, se référer au mode d'emploi du calibrateur.

CONTROLE DE QUALITE

Au moins deux niveaux de matériaux de contrôle doivent être analysés tous les jours. De plus, ces contrôles doivent être effectués à chaque nouvel étalonnage, à chaque fois qu'une nouvelle cartouche de réactif est utilisée et après certaines opérations de maintenance ou de réparation comme expliqué dans le *manuel d'utilisation* du SYNCHRON CX. Si le volume d'analyses ou la cadence d'utilisation sont importants, il sera peut-être nécessaire d'effectuer des contrôles plus fréquents ou d'utiliser des contrôles supplémentaires.

Les contrôles suivants doivent être préparés et utilisés selon leur notice respective. Les résultats de contrôle de la qualité qui divergent doivent être évalués par votre laboratoire.

Tableau 1.0 Matériel de contrôle de qualité

NOM DU CONTROLE	TYPE D'ECHANTILLON	CONSERVATION

PROCEDURE(S) DE TEST

1. Si nécessaire, préparer la cartouche de réactif comme indiqué dans la section Préparation du réactif de ce mode d'emploi et charger le réactif sur le système comme indiqué dans la section 6 *manuel d'utilisation* du SYNCHRON CX.
2. Une fois le chargement du réactif terminé, l'étalonnage doit être fait. Se référer à la section 6 du *manuel d'utilisation* du SYNCHRON CX pour plus de détails sur la procédure d'étalonnage.
3. Programmer les échantillons et les contrôles pour l'analyse comme indiqué dans la section 6 du *manuel d'utilisation* du SYNCHRON CX.
4. Après chargement des échantillons et des contrôles sur le système, suivre les protocoles d'utilisation du système comme décrit dans la section 6 du *manuel d'utilisation* du SYNCHRON CX.

CALCULS

Le système effectue automatiquement tous les calculs et fournit le résultat final sous forme de rapport. Les systèmes SYNCHRON CX4/5 n'effectuent pas les calculs des dilutions d'échantillon faites par l'utilisateur. Dans ce cas, le résultat fourni par l'instrument doit être multiplié par le facteur de dilution pour obtenir le résultat final. Les systèmes SYNCHRON CX4CE/5CE/7 (y compris les systèmes CX DELTA et CX PRO) effectuent les calculs du résultat final des dilutions d'échantillon faites par l'utilisateur quand le facteur de dilution est entré dans le système lors de la programmation des échantillons.

RAPPORT DES RESULTATS

INTERVALLES DE REFERENCES

Le groupe de travail pour le traitement des adultes du Center for Disease Control (CDC) a évalué les valeurs de triglycéride pour un risque cardiovasculaire comme étant :^{6,7}

Tableau 2.0 Intervalles de référence

RISQUE CARDIOVASCULAIRE	UNITES CONVENTIONNELLES	UNITES S.I.
Normal	Moins de 150 mg/dL	Moins de 1,95 mmol/L
Risque limite	150 – 199 mg/dL	1,95 – 2,59 mmol/L
Haut	200 – 500 mg/dL	2,60 – 6,49 mmol/L
Très élevée	Plus élevés que 500 mg/dL	Plus élevés que 6,50 mmol/L

Consulter les référence (8) pour les intervalles de référence supplémentaires selon l'âge et le sexe. Chaque laboratoire doit établir ses propres intervalles de références en se basant sur sa population de patients

Consulter les références (9,10,11) pour obtenir des directives sur l'établissement des intervalles de référence spécifiques du laboratoire.

Informations supplémentaires concernant le rapport des données, spécifiées par le laboratoire :

REMARQUES SUR LE PROTOCOLE

NIVEAU D'ANTICOAGULANT TESTE

1. Si le plasma est l'échantillon de choix, les anticoagulants suivants ont été trouvés compatibles avec la méthode à partir d'une étude de 20 volontaires en bonne santé :

Tableau 3.0 Anticoagulants acceptables

ANTICOAGULANT	NIVEAU TEST POUR INTERFERENCE IN VITRO	DÉVIATION MOYENNE PLASMA-SÉRUM (mg/dL) @ +37° C
Héparinate dammonium	29 Unités/mL	INS ^a
Héparinate de lithium	29 Unités/mL	INS
Héparinate de sodium	29 Unités/mL	INS
EDTA	3,0 mg/mL	INS

a INS = Interférence non significative (dans une limite de $\pm 10,0$ mg/dL ou 6 %).

2. Les anticoagulants suivants se sont avérés incompatibles avec cette méthode :

Tableau 4.0 Anticoagulants incompatibles

ANTICOAGULANT	NIVEAU TEST POUR INTERFERENCE IN VITRO	BIAIS PLASMA-SÉRUM (mg/dL) @ +37 °C ^a
Citrate de sodium	1,7 mg/mL	≤±30,0
Oxalate de potassium/Fluorure de sodium	4,0 / 5,0 mg/mL	≤-80,0

a La déviation est établie en fonction du pire des cas et non pas de la moyenne. Les signes plus (+) ou moins (-) dans cette colonne indiquent une déviation positive ou négative.

LIMITES

- Il est recommandé d'analyser ce test à +37 °C uniquement.
- Si une lipémie visible de 4+ ou plus est observée, il est recommandé de réaliser une dilution préliminaire de l'échantillon (1:10). Ceci permettra d'éviter des résultats faussés (bas), provoqués par une turbidité excessive.

INTERFERENCES

- La recherche d'interférences a été effectuée sur les substances suivantes :

Tableau 5.0 Intérférences

SUBSTANCE	ORIGINE	NIVEAU	EFFET OBSERVE ^a
Hémoglobine	Sang hémolysé	(4+) 500 mg/dL	≤±5,0 mg/dL
Bilirubine	Bovine	5 mg/dL	≤-8,0 mg/dL
Dextrose	S.O ^b	1200 mg/dL	≤+5,0 mg/dL
Créatinine	S.O	30 mg/dL	≤+3,0 mg/dL
Urée	S.O	500 mg/dL	≤+9,0 mg/dL
Acide ascorbique	S.O	1,5 mg/dL	≤-4,8 mg/dL
Acétoacétate	S.O	0,2 mg/mL	≤+0,7 mg/dL
		1,08 mg/mL	≤+3,7 mg/dL

a Les signes plus (+) ou moins (-) dans la colonne signifient une interférence positive ou négative.

b S.O = Sans objet.

- Se référer aux références (12,13,14) pour les autres interférences causées par les médicaments, les maladies et les variables pré-analyse.

PERFORMANCES

PLAGE ANALYTICAL

La méthode du Systèmes SYNCHRON CX[®] pour la détermination de cette substance à analyser présente la plage analytique suivante :

Tableau 6.0 Plage analytique

TYPE D'ECHANTILLON	UNITES CONVENTIONNELLES	UNITES S.I.
Sérum ou Plasma	10 – 1000 mg/dL	0,1 – 11,3 mmol/L

Les échantillons dont les concentrations dépassent la limite supérieure de linéarité doivent être dilués avec une solution saline et retestés.

PLAGE RAPPORTABLE (DÉTERMINÉE SUR PLACE) :

Tableau 7.0 Plage rapportable

TYPE D'ECHANTILLON	UNITES CONVENTIONNELLES	UNITES S.I.

EXACTITUDE

Une étude de comparaison a été réalisée sur des échantillons de patients et l'analyse des données a été faite par analyse de régression de Deming.

Sérum ou plasma:

Y (Systèmes SYNCHRON CX) ^a	= 1,065X + 9,89
N	= 94
MOYENNE (Systèmes SYNCHRON CX) ^a	= 314,2
MOYENNE (BMD Trig/GPO sur COBAS-BIO) ^b	= 285,7
COEFFICIENT DE CORRELATION (r)	= 0,999

a Les données présentées ont été recueillies sur les systèmes SYNCHRON CX4/CX5. L'exactitude entre les systèmes SYNCHRON CX a été déterminée par analyse de régression Deming aux systèmes SYNCHRON CX4/CX5.

b BMD est une marque déposée de Boehringer Mannheim Corporation. COBAS-BIO est une marque déposée de Roche Analytical Instruments, Inc.

Consulter les références (15) pour obtenir des directives sur la réalisation des tests d'équivalence.

PRECISION

Un Systèmes SYNCHRON CX[®] fonctionnant correctement doit donner des valeurs de précision inférieures ou égales aux valeurs suivantes:

Tableau 8.0 Valeurs de précision

TYPE DE PRÉCISION	TYPE D'ECHANTILLON	1 DS		VALEUR DE CHANGEMENT ^a		% CV
		mg/dL	mmol/L	mg/dL	mmol/L	
Intra-série	Sérum/Plasma	5,0	0,1	166,7	2,0	3,0
Total	Sérum/Plasma	7,5	0,2	166,7	2,0	4,5

a Lorsque la moyenne des résultats du test de la précision est inférieure ou égale à la valeur du changement, comparer l'écart type du test à l'écart type de référence indiqué ci-dessus pour déterminer l'acceptabilité du test de précision. Lorsque la moyenne des résultats du test de la précision est supérieure à la valeur du changement, comparer le % CV du test à la référence indiquée ci-dessus pour déterminer l'acceptabilité. La valeur du changement = (DS indiqué/CV indiqué) x 100.

Consulter les références (16) pour obtenir des directives sur les tests de précision à effectuer sur place.

REMARQUE

Ces degrés de précision et d'exactitude ont été obtenus lors de procédures de tests spécifiques sur les Systèmes SYNCHRON CX® et ne représentent qu'un exemple de spécifications de performance de ce réactif.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Pour plus de renseignements sur les systèmes SYNCHRON CX, se référer au manuel SYNCHRON CX correspondant.

DOMMAGES D'EXPÉDITION

Si vous remarquez lors de la réception que le produit est endommagé, notifiez votre centre de support clinique Beckman Coulter.

RÉFÉRENCES

1. Bucolo, G., David, H., *Clin. Chem.*, 19:476 (1973).
2. Pinter, J. K., Hayashi, J. A., Watson, J. A., *Arch. Biochem. Biophys.*, 121:404 (1965).
3. Tietz, N. W., "Specimen Collection and Processing; Sources of Biological Variation", *Textbook of Clinical Chemistry*, 2nd Edition, W. B. Saunders, Philadelphia, PA (1994).
4. National Committee for Clinical Laboratory Standards, *Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens*, Approved Guideline, NCCLS publication H18-A, Villanova, PA (1990).
5. CDC-NIH manual, *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories*, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. (1984).
6. NIH Publication No. 01 3305, *ATP III Guidelines At-A-Glance*, Quick Desk Reference, May (2001).
7. NIH Publication No. 01 3670, Third Report of National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, *Evaluation and Treatment of High Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III)*, May (2001).
8. Tietz, N. W., *Clinical Guide to Laboratory Tests*, 3rd Edition, W. B. Saunders, Philadelphia, PA (1995).
9. National Committee for Clinical Laboratory Standards, *How to Define, Determine, and Utilize Reference Intervals in the Clinical Laboratory*, Approved Guideline, NCCLS publication C28-A, Villanova, PA (1995).
10. Tietz, N. W., ed., *Fundamentals of Clinical Chemistry*, 3rd Edition, W. B. Saunders, Philadelphia, PA (1987).
11. Henry, J. B., *Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods*, 18th Edition, W. B. Saunders Company, Philadelphia, PA (1991).
12. Young, D. S., *Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests*, 3rd Edition, AACC Press, Washington, D.C. (1990).
13. Friedman, R. B., Young, D. S., *Effects of Disease on Clinical Laboratory Tests*, 2nd Edition, AACC Press, Washington, D.C. (1989).
14. Young, D. S., *Effects of Preanalytical Variables on Clinical Laboratory Tests*, AACC Press, Washington, D.C. (1993).
15. National Committee for Clinical Laboratory Standards, *Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples*, Tentative Guideline, NCCLS publication EP9-T, Villanova, PA (1993).
16. National Committee for Clinical Laboratory Standards, *Precision Performance of Clinical Chemistry Devices*, Tentative Guideline, 2nd Edition, NCCLS publication EP5-T2, Villanova, PA (1992).

EC REP Beckman Coulter Ireland Inc., Mervue Business Park, Mervue, Galway, Ireland (353 91 774068)



Beckman Coulter, Inc., 4300 N. Harbor Blvd., Fullerton, CA 92835